



Apague la bomba de infusión o pellizque la pinza blanca y llame al centro de anestesia si algunos de los siguientes síntomas se desarrollan:

- Erupciones en la piel o urticaria
- El entumecimiento o picazón en la boca, labios, o lengua
- Sabor metálico en la lengua
- Zumbido en los oídos
- Dificultad para pronunciar las palabras
- Visión borrosa

Si la bomba de infusión empieza a sonar o para de funcionar, por favor llame a la línea directa (844) 724-6123 para asistencia.

¿Cuánto dolor siente hoy?



*Escala de Dolor Wong-Baker

Instrucciones Para el Catéter de Nervio Periférico

Información Importante Para el Paciente

Después de que salga de su cirugía, usted recibirá una llamada del equipo de InFuSystem para evaluar el control de su dolor y grabar los resultados para presentarle a su doctor. No es una llamada de ventas. Por favor ayúdenos con esta evaluación.

La Línea Directa Para Asistencia e Información Sobre la Bomba de Infusión

Línea Directa 24/7: (844) 724-6123


Número de Contacto del Servicio de Anestesia Por Catéter:

Número durante el Día:

Fuera de Horas/ Fin de Semana:

Si usted tiene alguna emergencia llame al 911

Número de Serie de la Bomba de Infusión:

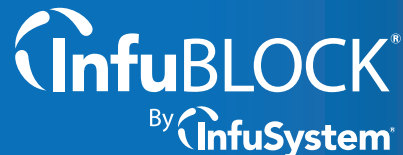

InFuSystem, Inc.
11130 Strang Line Road | Lenexa, KS 66215
(844) 724-6123 | infusystem.com/block | block@infusystem.com

PW141S
v 12/19



Instrucciones Sobre el Bloqueo Nervio Periférico

Usted ha recibido un bloqueo continuo para extender el alivio de dolor después de su cirugía. Esto es una terapia para calmar el dolor de una manera que administra un anestésico para entumir a un nervio. Después de las primeras 12-20 horas su extremidad no estará tan entumida. Usted tal vez tendrá un poco más de movimiento y molestia. Usted NO va a poder ver la medicina pasar por el tubo pero los números en la pantalla continuarán a bajar. Este bloqueo de nervio no necesariamente va a eliminar el dolor completamente, pero usted necesitará menos medicina oral (pastillas para el dolor) cuando esté funcionando. Usted regresará a casa con una prescripción de medicina para el dolor para cuando tenga dolor adicional.

1. Información sobre el uso diario de la bomba de infusión:

- No se debe mojar la bomba de infusión. No bañarse con la bomba de infusión; usted puede darse un baño de esponja.
- La bomba de infusión le dará, continuamente y automáticamente, una cantidad de medicamento anestésico a través del tubo pequeño para mantener el nervio entumecido. Periódicamente usted escuchará un zumbido cuando la bomba de infusión saque una cantidad de medicamento.
- Tenga cuidado a no jalar el tubo o se desalojará del sitio del nervio dirigido.
- La pantalla de la bomba de infusión debe estar visible a través de la ventana en su mochila. Usted verá ****RUN** en la pantalla cuando esté trabajando.
- La pantalla demostrará la cantidad de medicamento que le queda ****RES VOL.**
- Usted verá los números bajar cuando la bomba de infusión esté administrando el medicamento.
- Empiece a tomar sus pastillas para el dolor como le dirigió su doctor a la primera sensación de incomodidad.

- Fuga ligera al sitio del catéter es aceptable mientras el dolor esté controlado. Si le está fugando el sitio del catéter, intente reforzar el sitio con una gasa adicional o aplique una toalla limpia encima para el exceso del medicamento. NO cambie la prescripción.

2. (Si ordenó el doctor) use el botón de ****DOSE**:

- El botón ****DOSE** permite administrar medicamento anestésico adicional si es necesario.
- Al presionar el botón, usted recibirá una dosis de [] miligramos. Escuchará una serie de zumbidos cuando la bomba de infusión esté administrando la dosis de medicamento adicional.
- Un periodo de bloqueo de [] minutos empezará. Usted no podrá administrar dosis adicionales hasta que se acabe el periodo de bloqueo.

3. Alarmas de la Bomba: Todas las alarmas tendrán un mensaje en la pantalla. Aquí tiene algunos consejos de solución:

- ****HiPressure**: Examine el tubo por alguna enroscadura y revise si la pinza blanca que está en el tubo está abierta.
- Un pitido cada 5 minutos: revisa la pantalla, está parada la bomba de infusión? Presione el botón de ****Start/Stop** hasta que vea 3 líneas a través de la pantalla.
- ****Low battery/Batería baja**: La carga de las baterías está baja, cambia las baterías. Ay baterías en la caja blanca.
- ****Low/Bajo**: la bomba de infusión está baja en medicamento, (quedan 30-45min.)
- **** Empty/Vacío**: el medicamento se ha terminado. Mantenga presionado el botón de ****Start/Stop** hasta que se apague la alarma.

4. Fin de la Infusión:

- Usted tendrá la bomba de infusión en su casa de tres a cuatro días.
- La bomba de infusión señalará. ****Low Vol**: volumen bajo cuando le queda 5ml (alrededor de 30- 45min.) de medicamento.
- Una vez que se completa el volumen, la bomba emitirá una alarma de ****Empty**: presione el botón de ****Stop/Start** para silenciar la alarma, una vez que aparezca **"STOPPED"** en la pantalla, presione y mantenga presionado el botón **"ON / OFF"** hasta que la pantalla quede en blanco.

5. Para quitar el catéter:

- Si le han dado instrucciones para quitarte el catéter, siga las instrucciones que le dieron para quitárselo.

6. Instrucciones de devolución de la bomba una vez que se quita el catéter al paciente:

1. Quite las baterías adicionales de la caja para la devolución
2. Retire la bolsa de medicamento intravenoso de la bolsa negra
3. Corte los tubos del lado derecho e izquierdo de la bomba y descarte junto con el catéter y la bolsa de medicamento
4. Coloque la bomba en la bolsa Ziplock (aún tendrá parte de los tubos)
5. Coloque la bolsa Ziplock con la bomba y el estuche negro dentro de la caja de devolución
6. Selle la caja con los adhesivos que se proporcionan
7. Devuelva a través del Servicio Postal de los Estados Unidos: Coloque la caja dentro de su buzón, entréguela al cartero o llévela a la oficina postal local

7. Llame a la línea directa 844-724-6123 para asistencia, información, o preguntas sobre la bomba de infusión:

- Alarmas
- Fuga excesiva saliendo de la bomba de infusión
- Si se desconectan los tubos
- Si se jaló el catéter en el sitio de la extremidad
- Si el control del dolor es insuficiente